



HISクライアント端末 ID-Link利用プロキシ設定 (FirefoxPortable)

第3版 2021/08/25

株式会社エスイーシー
ID-Linkサポートセンター

重要

HIS端末でWebベースのシステムを利用している場合は、ID-Linkのプロキシを利用しないように、アドレスを例外設定する必要があります。設定に不備があると、他のWebベースのシステムが利用できなくなります。事前に、ご利用Webシステムと、アドレスを洗い出しの上、次頁以降の手順で、HIS端末に例外設定をお願いいたします。

また、HIS端末からID-Linkのプロキシを利用する際は、ID-LinkアプライアンスのFirewallに設定を追加する必要があります。事前に ID-Linkサポートセンター（support@mykarte.com）までネットワークアドレスをご連絡頂けますようお願いいたします。

FirefoxPortable ダウンロード

下記URLより、FirefoxPortableをダウンロードします。

https://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable#localizations

Language→Japanese 日本語 行の “Download”をクリックしてください。

Localizations

Language		Link	MD5
Arabic	عربي	Download	5a56bcb8007ef48116dbc91aae50b344
Chinese (Simplified)	中文 (简体)	Download	fe9812c9a6240ae46bda6a98c0c809f3
Chinese (Traditional)	正體中文 (繁體)	Download	8de9419605d97934f9e272dd6969b816
Czech	Čeština	Download	9a1690fa2dea9571ba0e21c49540a473
Dutch	Nederlands	Download	f2e17241f54acb7e748e6763b9ed2511
English	English	Download	2daa4fb7924d6e563da83c219c3556ac
English (British)	English (British)	Download	476831d49659c30bd1ec24bed2dca242
French	Français	Download	8bce3ff677401ef0a24494f7e2eae00a
German	Deutsch	Download	1e59230589daf2ada45bc9f7bf9ebc78
Hungarian	Magyar	Download	885c8c66ebd7eda437850f5d1e0b0341
Italian	Italiano	Download	77013fc4c1d6dbb134c5592c64c1021f
Japanese	日本語	Download	9b3f4c36a4116e25d737fc4646dd006c
Korean	한국어	Download	693665825eea4c8cf4a5d49b394af545

FirefoxPortable端末設定 1


ダウンロードしたexeを任意の場所にインストール後、FirefoxPortableフォルダ内の「FirefoxPortable.exe」を起動し、右上メニューをクリック→『オプション』を選択。

① FirefoxPortable.exeをダブルクリック

名前	種類
App	ファイル フォルダ
Data	ファイル フォルダ
Other	ファイル フォルダ
FirefoxPortable.exe	アプリケーション
help.html	HTML ドキュメント



② メニュー [三] をクリック

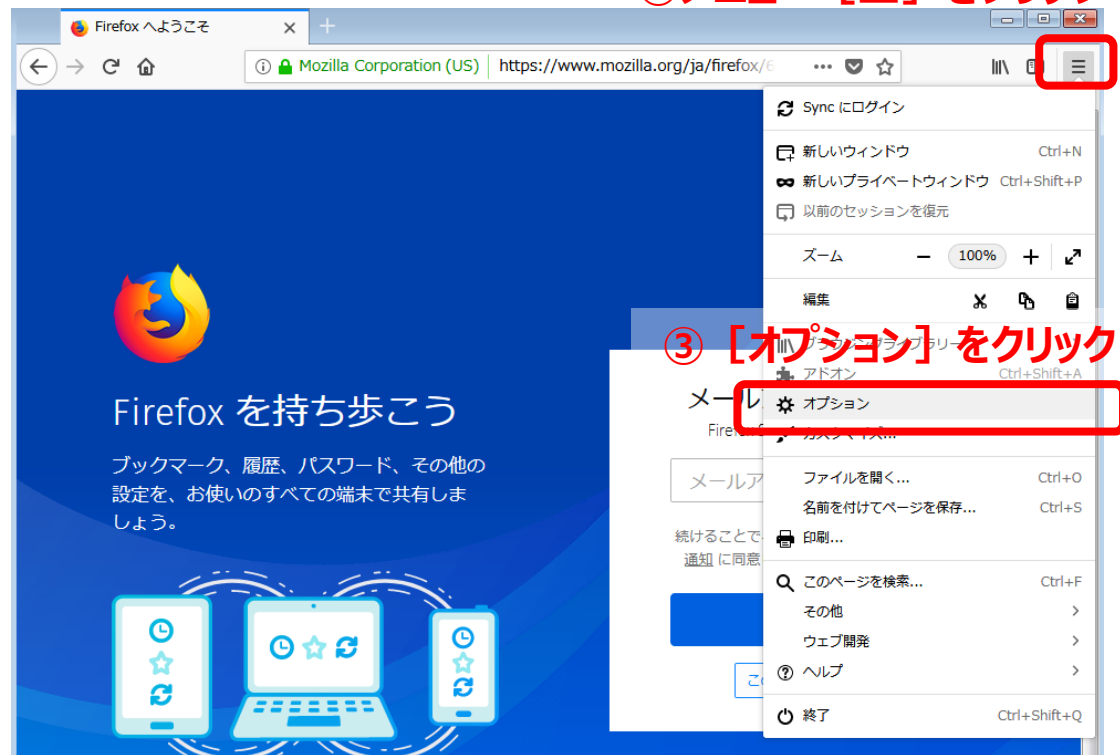

③ [オプション] をクリック

FirefoxPortable端末設定 2

「一般」のページを一番下までスクロールし「ネットワークプロキシ」の『接続設定』ボタンをクリックします。



FirefoxPortable端末設定 3

“手動でプロキシを設定する”を選択し、HTTPプロキシ欄に**指定のアドレス（※1）** ポート欄に『**3128**』を入力し、“全てのプロトコルでこのプロキシを使用するに”チェックを入れてください。
事前に洗い出した、**ID-Linkプロキシを利用しないWebシステムは**、“**プロキシーなしで接続**”欄に**Webシステムのアドレス**を入力し、『OK』をクリックしてください。

インターネット接続

インターネット接続に使用するプロキシーの設定

- プロキシーを使用しない(Y)
- このネットワークのプロキシー設定を自動検出する(W)
- システムのプロキシー設定を利用する(U)
- 手動でプロキシーを設定する(M)

HTTP プロキシー(X) 10.xxx.yyy.88 ポート(P) 3128

全てのプロトコルでこのプロキシーを使用する(S)

SSL プロキシー(L) 10.xxx.yyy.88 ポート(Q) 3128

FTP プロキシー(F) 10.xxx.yyy.88 ポート(R) 3128

SOCKS ホスト(C) 10.xxx.yyy.88 ポート(T) 3128

SOCKS v4(K) SOCKS v5(V)

- 自動プロキシー設定スクリプト URL(A)

プロキシーなしで接続(N)

172.*;192.168.1.1|

(※1)

xxx.yyyの部分は、各施設によって異なります。
弊社ID-Link担当よりメールでお伝えします。

ID-Linkプロキシを利用しないWebシステムの
IPアドレスを設定して下さい。

FirefoxPortable端末設定 4

FirefoxPortbleのアドレス欄に「<http://www.mykarte.com/mykarte/>」を入力し、ID-Linkのログインページが表示されることを確認できれば設定完了です。



The screenshot shows the Firefox Portable browser window with the address bar containing the URL <http://www.mykarte.com/mykarte/>. The page title is "ID-Link" and the logo "ID Link mykarte.com" is visible. The page content includes a "MEMBER LOGIN" section with input fields for "ID" and "Password" and a "ログイン" button. The main content area is divided into sections: "地域連携システムとは" (Regional Collaboration System) with a document icon and text about medical information sharing; "Information" with a speech bubble icon and links for "セキュリティ情報" (Security Information), "機能リリースのお知らせ" (New Function Release Notice), and "システム停止のお知らせ" (System Stop Notice); and "その他のお知らせ" (Other Notices).

FirefoxPortable端末設定（参考1）


FirefoxPortbleのホームページをID-LinkのURLに指定する場合は下記の設定を行ってください。



FirefoxPortable端末設定（参考2）

出来上がったFirefoxPortableフォルダをコピーし、他の端末へ展開すると設定したProxyの情報も引き継がれます。

ブラウザ起動時は、フォルダ内の“FirefoxPortable.exe”を起動して下さい。

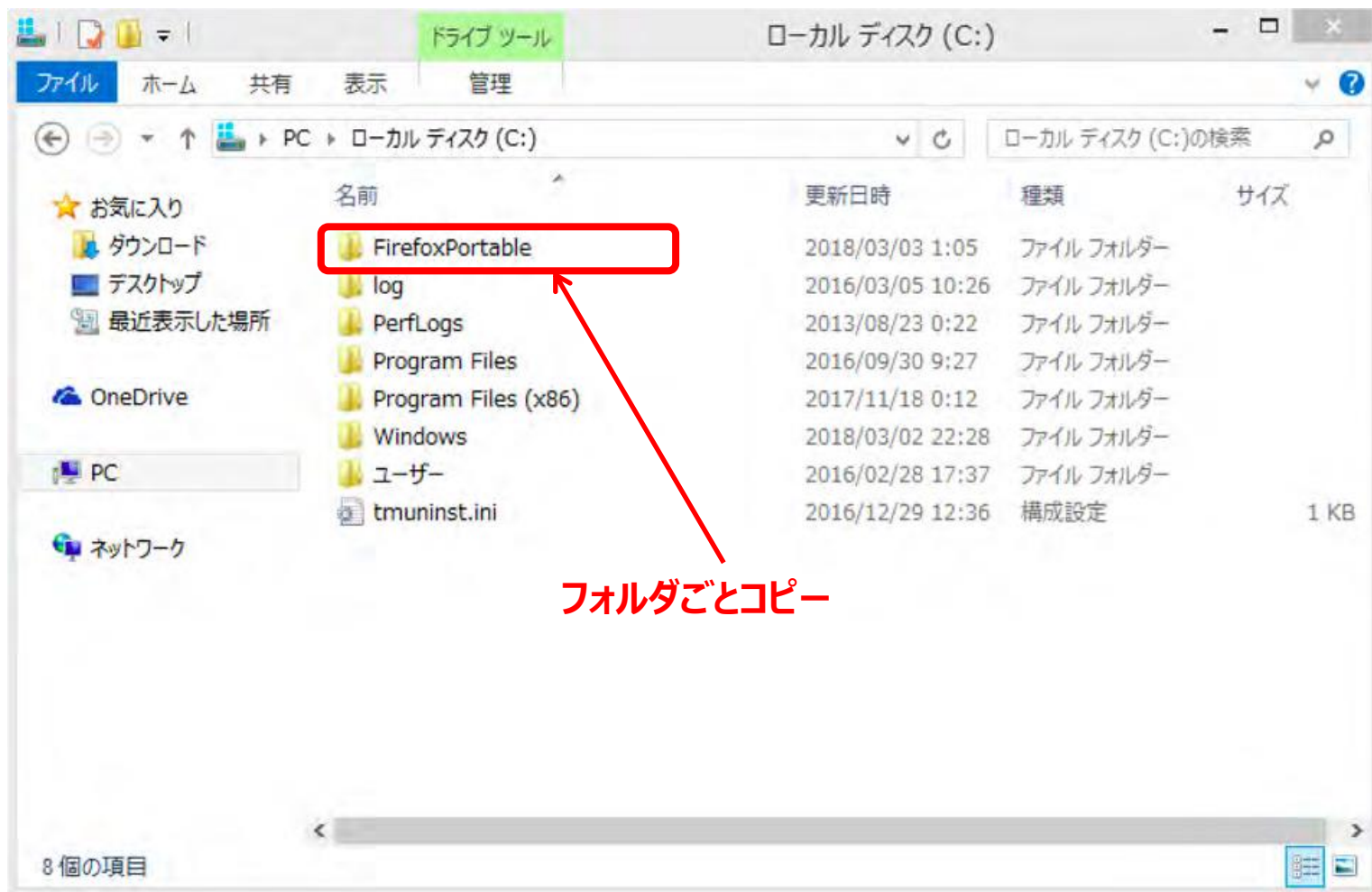

お問い合わせ先

- ご利用のシステムの接続実績や、その他ご不明点につきましては、株式会社エスイーシー ID-Linkサポートセンターまでお問い合わせください。

- **お電話でのお問い合わせ**

0138-22-7227

受付時間：月曜～金曜9：00～12：00、13：00～17：00（祝日および年末年始を除く）

- **メールでのお問い合わせ**

support@mykarte.com

お問い合わせの際には、下記情報の記載をお願いいたします。

- ・ ご所属（会社、医療機関等）
- ・ お客様のお名前
- ・ Emailアドレス
- ・ ご連絡先（住所、電話番号）
- ・ 件名：**HIS端末へのプロキシ設定（ご利用ブラウザ名・バージョン）**

また、お問い合わせに対して返信を差し上げるまでに数日を要する場合がございます。

改版履歴

版数	項目	説明	日付
第1版	全般		2018/08/06
第2版	レイアウト、例外設定の記載例の修正		2020/03/13
第3版	ネットワークアドレス連絡依頼の追加	ID-LinkアプライアンスのFirewall設定が必要なことを説明文に追加。	2021/08/25